

M

STUDIO

Software

MedRx[®]

Installationsvejledning til Studio-software





0123

TÜV SÜD Product Services GmbH

Ridlerstraße 65 • 80339 München • Tyskland

MedRx

www.medrx-diagnostics.com



1200 Starkey Rd., #105, Largo, FL 33771 USA.

Frikald: (888) 392-1234 • (727) 584-9600

Fax: (727) 584-9602 • E-mail: medrx@medrx-diagnostics.com

www.medrx-diagnostics.com

EC REP

MedRx's autoriserede repræsentant i Europa

DGS Diagnostics A/S

Audiometer Alle 1 • 5500 Middelfart • Danmark

Distributør: MedRx International

c/o MAICO Diagnostics GmbH

Sickingenstr. 70-71, 10553 Berlin, Tyskland

Tlf.: +49 30/70 71 46-50

Fax: +49 30/70 71 46-99

E-mail: medrx-sales@maico.biz

www.medrx-diagnostics.com



Du kan finde MedRx' arkiv med brugervejledninger her: www.medrx-diagnostics.com/support/manuals-studio-software/archive

Indholdsfortegnelse

Krav til computer	4
Software-installation	5
Tilslutning af enhed	7
Lydkortsindstillinger	8
Opret forbindelse til en database	10
Begrænset garanti	12





Krav til computer

MedRx' minimumskrav:

Windows® PC
Intel™ i5, 2.0 GHz eller nyere
4 GB RAM
20 GB ledig diskplads
Ledig 2.0 USB-indgang
Windows 10 eller 11 Professional (32- eller 64-bit)
Kompatibel med Windows Surface Tablet
Kompatibel med 3.0 USB


MedRx' anbefalede krav:

Windows® PC
Intel™ i5 Quad Core eller nyere
8 GB RAM eller mere
Ledig USB 2.0-port
Grafikkort med 2 GB dedikeret videohukommelse
50 GB eller mere ledig diskplads
Højhastighedsinternetforbindelse
Windows 10 eller 11 Professional 64-bit
Kompatibel med 3.0 USB


Software-installation



1. Indsæt MedRx USB-drevet i en USB-port:
 - Start **My Computer** (Min computer)
 - Find USB-drevet

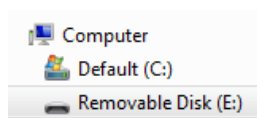

(Drev E:). Dette kan variere afhængigt af den valgte USB-indgang.
Se brugervejledningen til din computer.

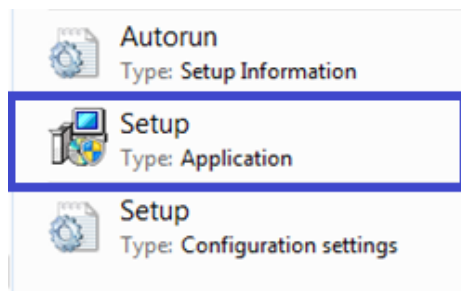


2. Dobbeltklik på **Setup** (Opsæt) for at starte opsætningen:


BEMÆRK: Hvis du bliver bedt om det, skal du *Accept Permission to Install Software (Acceptere installationen af softwaren)*.




3. I vinduet Setup (Opsætning) skal du vælge **Install MedRx Studio** (Installer MedRx Studio).

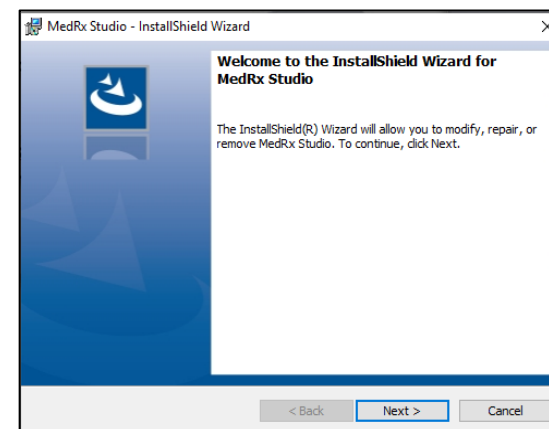


4. Dette er velkomstvinduet.
 - Tryk på **Next** (Næste) for at fortsætte.

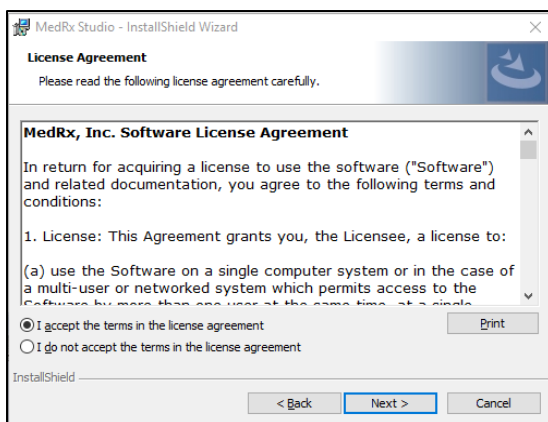


5. Læs softwarelicensaftalen. Dette er et vigtigt dokument, der definerer den acceptable brug af Studio-softwaren.
- Efter du har læst aftalen, skal du vælge **I accept...** (Jeg accepterer...).
 - Klik på **Next** (Næste).

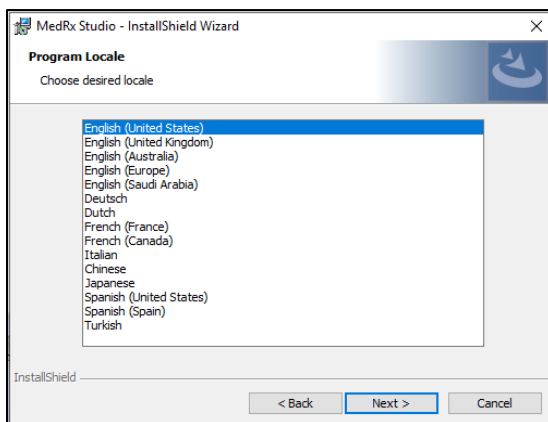


6. I det næste vindue skal du vælge dit foretrukne sprog og softwarens placering på disken.
- Foretag dine ønskede valg, og klik derefter på **Next** (Næste).

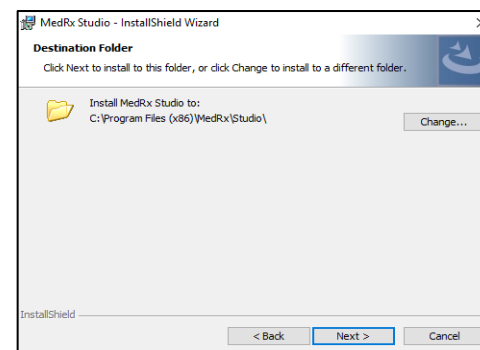


7. Dette vindue angiver placeringen af programfilerne. Det anbefales for de fleste brugere at vælge standardplaceringen. Placeringen kan dog ændres, hvis ønsket.
- Hvis du vil fortsætte med standardplaceringen, skal du klikke på **Next** (Næste).
BEMÆRK: For at ændre placeringen af filerne (kun avancerede brugere eller systemadministratorer) skal du klikke på **Change** (Ændr).

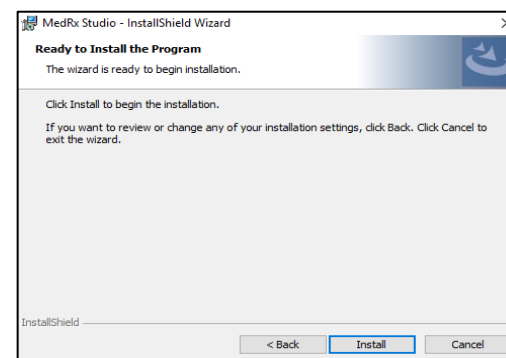

8. Installationsprogrammet er nu klar til at installere Studio-softwaren.
- Tryk på **Install** (Installer) for at fortsætte.
 - Hvis du vil foretage ændringer, skal du klikke på **Back** (Tilbage).

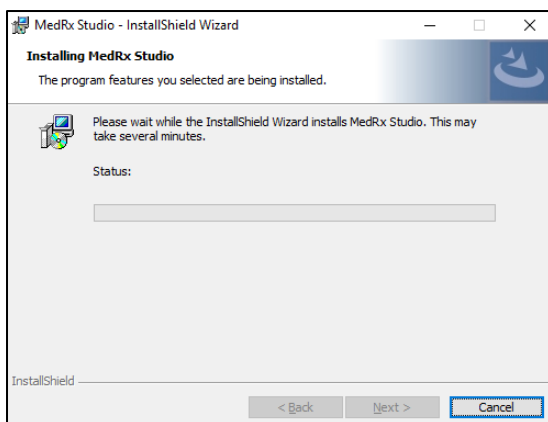

9. Installationen kører nu.

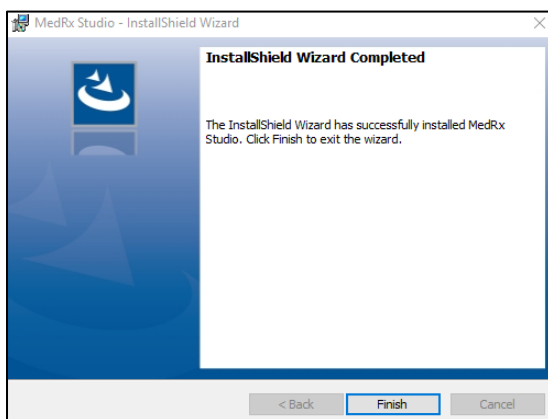


10. Når installationen er fuldført,

- skal du klikke på **Finish** (Afslut).


Tilslutning af enhed

Dine MedRx-produkter tilføres strøm og sender data via USB-indgang.

Slut USB-kablet fra MedRx-enheden til din computer.

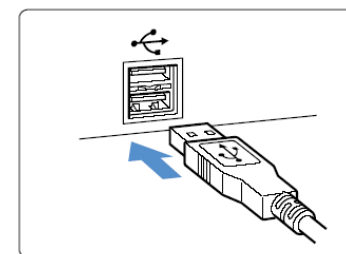

Vent på, at systemet kopierer og installerer Windows-standarddrivere.

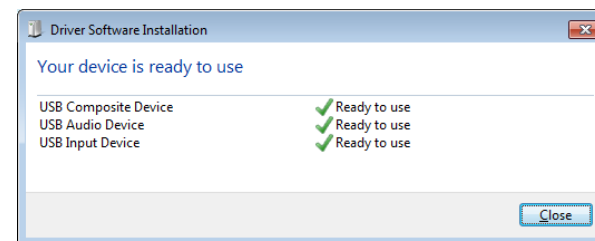

Vent til dette vindue vises, og alle enheder er "Ready to use" (Klar til brug).


- Klik på **Close** (Luk).

Lydkortsindstillinger


Som næste skridt skal du bekræfte eller indstille standardlydenheden i Windows. Dette vil dirigere alle Windows-lyde, der ikke genereres af MedRx, til det interne lydkort på din computer. (Disse lyde omfatter hændelsesmeddelelser såsom nye e-mails og fejlvarsler samt lyd- og videoafspilning.)



1. **Højreklik** på højttalerikonet i proceslinjen.

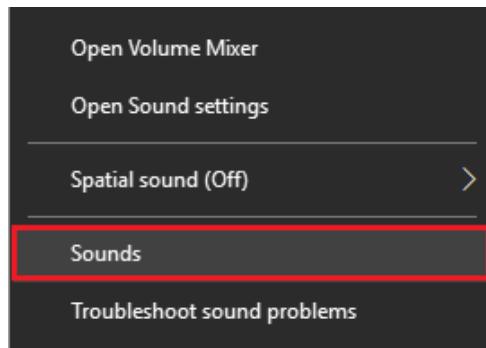


2. Vælg indstillingen **Sounds** (Lyde) fra listen.

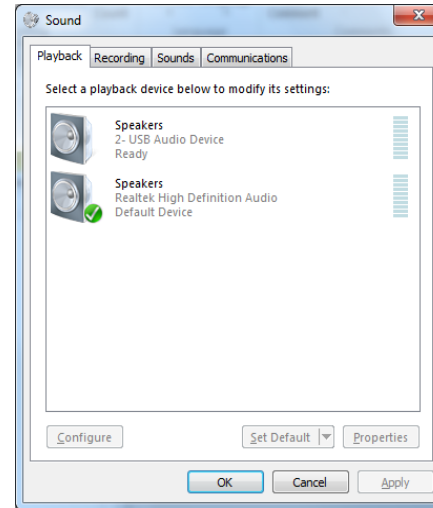

3. Kontrollér, at MedRx-lydenheden ikke er indstillet som standard i Windows-kontrolpanelet Lyd, under fanerne Afspilning og Optagelse. Hvis enheden er indstillet som standard, skal du ændre dette ved at klikke på dit systems (ikke MedRx) lydenhed og derefter vælge Angiv standard.

BEMÆRK: Det interne lydkort på din computer vil sandsynligvis ikke have det samme navn, som er vist i dette vindue. Du kan finde navnet på dit interne lydkort i din computers brugervejledning. Indstil denne enhed i overensstemmelse hermed.

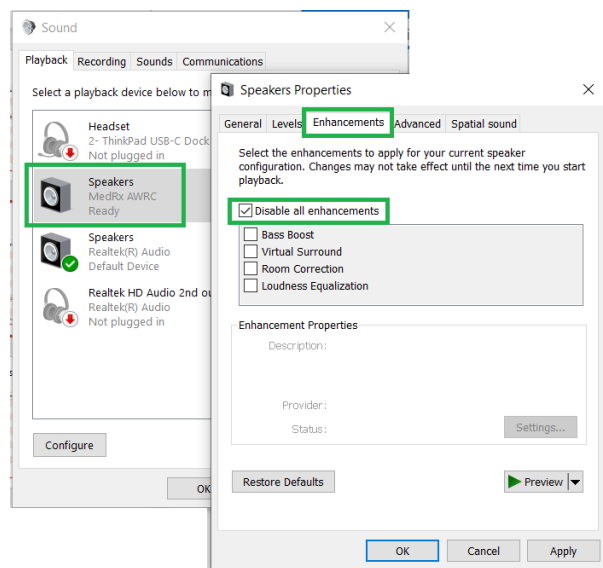

4. Højreklik på MedRx-enheden på fanen **Playback** (Afspilning) i Windows-kontrolpanelet Lyd og vælg Egenskaber. Gå til fanen **Enhancements** (Forbedringer), og markér feltet **Disable all enhancements** (Deaktiver alle forbedringer). Klik derefter på **Apply** (Anvend) og så **OK**.

Forbedringer er muligvis ikke tilgængelige på alle pc'er. Det er ikke nødvendigt at foretage disse ændringer, hvis pc'en ikke understøtter lydforbedringer.

5. Højreklik på MedRx-enheden i fanen **Recording** (Optagelse) i Windows-kontrolpanelet Lyd, og vælg Egenskaber. Gå til fanen **Enhancements** (Forbedringer), og markér feltet **Disable all enhancements** (Deaktiver alle forbedringer). Klik derefter på **Apply** (Anvend) og så **OK**.


Forbedringer er muligvis ikke tilgængelige på alle pc'er. Det er ikke nødvendigt at foretage disse ændringer, hvis pc'en ikke understøtter lydforbedringer.

6. Klik på **OK**.


Tillykke, du har nu konfigureret din nye MedRx-enhed

Opret forbindelse til en database

MedRx Studio-softwaren kan køre med Noah Systems, OtoAccess, MS SQL Express eller uden adgang til en database.

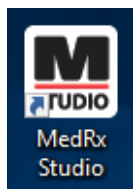


For at opsætte en database skal du dobbeltklikke på MedRx Studio-ikonet på dit Windows-skrivebord.

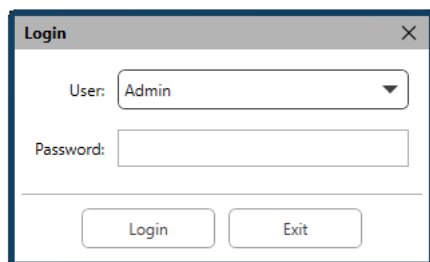

Hvis login-vinduet vises, skal du klikke på Login. Der skal ikke skrives nogen adgangskode ved den første installation.



Klik på tandhjulet (Indstillinger) i øverste højre menulinje.

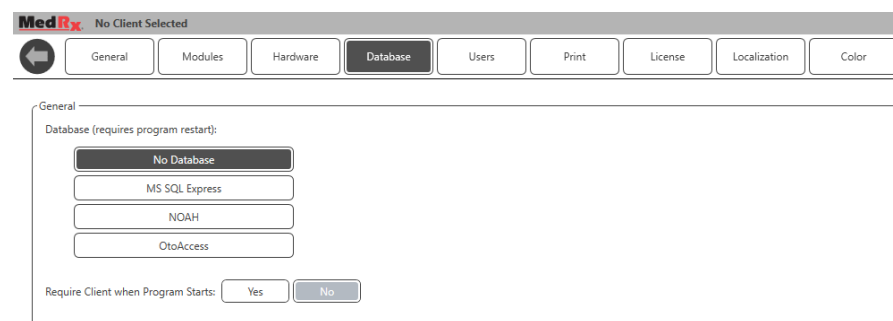

Vælg fanen Database. Klik på din ønskede database. Luk MedRx Studio-softwaren for at anvende ændringerne.

Bemærk: Kun databaser, der er sat op, vises.

Konfiguration af en database




Uden en database

- Dobbeltklik på genvejen MedRx Studio på dit Windows-skrivebord.




Noah

- Download og installer Noah.
- Start Noah.
- Vælg en patient.
- Start MedRx Studio-modulet, og følg Noah-procedurerne.

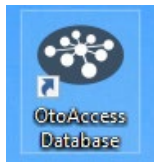

OtoAccess

- Download og installer OtoAccess.
- Start OtoAccess.
- Vælg en patient.
- Start MedRx Studio-modulet, og følg OtoAccess-procedurerne.

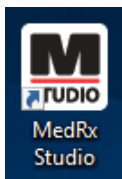


MS SQL Express


- Download og installer MS SQL Express.
- Kør MedRx MS SQL-databaseopsætning.

- Dobbeltklik på genvejen MedRx Studio på dit Windows-skrivebord.

Bemærk: MedRx giver adgang til SQL-databaseforbindelser. Ejeren af databasen skal konfigurere databasen og politikken for sikkerhedskopiering således, at de opfylder lokale lovkrav.

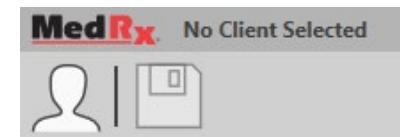

- **Vælg Client** (Vælg klient) i øverste venstre hjørne.

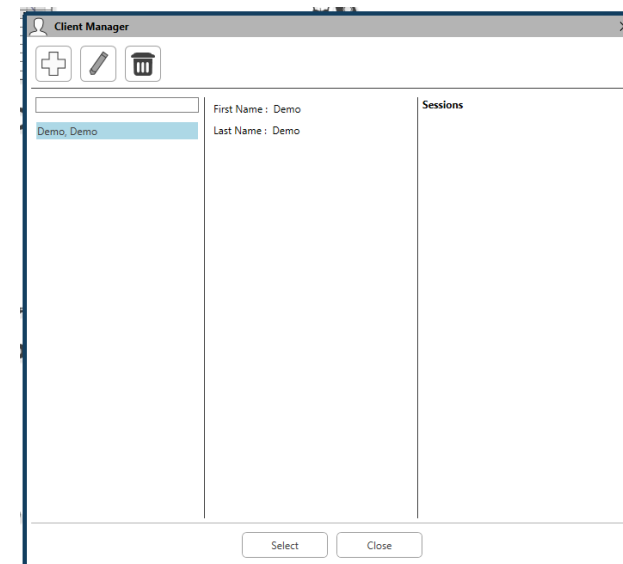

- + - Opret klient.
- **Blyant** - Rediger klient.
- **Papirkurv** - Slet klient.

Begrænset garanti

MedRx garanterer, at dette produkt er fri for defekter i materialer og udførelse i to år fra købstidspunktet. Hvis dette systems ydeevne ikke er som specificeret i det tidsrum, er køberen ansvarlig for at ringe til MedRx på +49 30 70 71 46 43. Virksomhedens repræsentant vil råde ejeren til enten at returnere specifikke komponenter eller hele systemet til:

MedRx International
c/o MAICO Diagnostics GmbH
Sickingenstr. 70-71 10553 Berlin
Tyskland

MAICO vil reparere eller udskifte alle defekte enheder, afprøve systemet og/eller komponenterne til fulde og straks sende systemet tilbage til ejeren. Der er ingen udgifter til reparation eller returforsendelse, hvis systemet er maks. to år og ikke er blevet misbrugt, mishandlet eller beskadiget. Sådant skade omfatter, men er ikke begrænset til, tab, udsættelse for stærk varme på mere end 37,78 °C samt vand-/væskeskade.

Reparation eller udskiftning af systemet som muligt iht. denne garanti er køberens eneste og særlige retsmiddel. MedRx hæfter ikke for følgeskader eller tilfældige skader eller for brud på udtrykkelige eller underforståede garantier. Undtaget i gældende lovs omfang begrænses dette produkts underforståede garantier, salgbarhed eller egnethed til varigheden af denne garanti.

MAICO vil efter forgodtbefindende servicere og reparere produkter, der ikke længere er dækket af garantien på købers anmodning, og vil tage betaling for dele og arbejds løn efter behov.

Den begrænsede garanti betragtes som ugyldig, hvis der installeres software eller hardware på dette produkt, som ikke i forvejen er godkendt af MedRx, Inc. Godkendt software omfatter Noah- og HIMSA-godkendte høreapparatproducenters programmeringsmoduler til tilpasning af høreapparater.

MAICO hæfter ikke for problemer som resultat af installation af ikke-godkendt software eller hardware. Hvis ikke-godkendt software eller hardware installeres på system, og det forårsager en konflikt, vil MedRx servicere produktet for et gebyr, der vil blive bestemt på tidspunktet for service.